

Bei einem chirurgischen Eingriff zur Anlage eines Stomas entstehen durch die Narbenbildung Schwachstellen in der Bauchdecke.

Das erhöht die Gefahr der Bildung eines Bruchs (Hernie) oder Darmvorfalls (Stomaprolaps).

Handelsübliche Stomabandagen unterstützen die Bauchdecke insbesondere bei Belastungen und sind wichtiger Bestandteil bei der Vermeidung dieser Komplikationen. Unsere **Stomabandage Brillinger Plus®** wird individuell angepasst und verfügt zusätzlich zu den oben genannten Funktionen über ein Fenster. D.h. beim Wechsel der Versorgung kann die Bandage angelegt bleiben ohne dass die Gefahr von Verschmutzung besteht. Da sie gleichzeitig ihre Stützfunktion erfüllt, erleichtert sie den Versorgungswechsel.

In die **Stomabandage Brillinger Plus®** ist eine Fixierung für das FlexiCap-System® integriert.



Brillinger GmbH + Co. KG
 Handwerker-Park 25
 72070 Tübingen
 Telefon 0 70 71 / 41 04-0
 Telefax 0 70 71 / 41 04-5 00

Ihr Ansprechpartner:
 Alexander Kleefeld
 Bereichsleitung Home Care/exam. Krankenpfleger
 Telefon 0 70 71 / 41 04-1 19
 E-Mail: alexander.kleefeld@brillinger.de

www.brillinger.de
info@brillinger.de

Brillinger.
 Orthopädie

Brillinger.
 Orthopädie

Stoma-Kappe
Brillinger FlexiCap®
 +
 Stomabandage
Brillinger Plus®



Das **Silikon-Druckelement** wurde in unserem Hause entwickelt und wird in 3 Standardgrößen (S/M/L) angeboten. Mit diesen, von uns gefertigten Elementen, kann ein unkompliziertes Stoma versorgt werden. Die Standardgrößen können nach Bedarf verändert werden. Außerdem können Versorgungsungen für Kinder und komplizierte Stomata anhand eines Plastasil-Abgußes und Fotodokumentationen angepasst werden.




Die Auswahl des richtigen Systems erfolgt unter Berücksichtigung

- der Stomaform und -größe bzw. des Stomadurchmessers
- der Lage des Stomas
- des verwendeten Versorgungssystems
- der Trageweise des Stomabeutels

Bei der Auswahl der richtigen Pelotte helfen Ihnen unsere ausgebildeten Stomafachkräfte, Silikontechniker und Bandagisten gerne.

Eine Versorgung sollte immer in Kombination mit einer Stomabandage erfolgen.

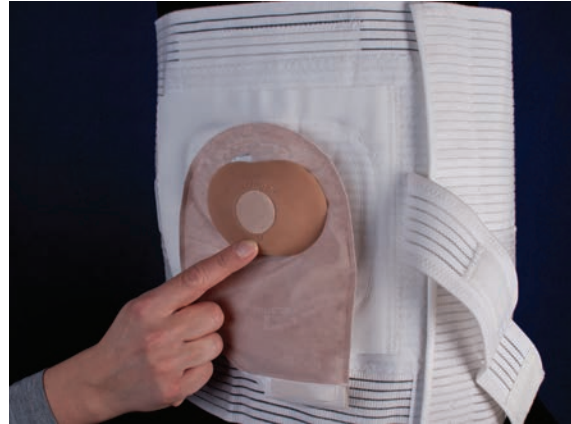

Medizinische Indikationen

- Versorgung eines prolabierte Stomas
- Haftungsverbesserung der Stomaplatten bei schwierigen Versorgungsungen
- Versorgung einer parastomalen Hernie
- Prophylaktischer Einsatz zur Vermeidung eines Prolaps bzw. Hernie (z.B. bei Bindegewebschwäche)

Das Silikon-Druckelement hilft auch bei der Wiedereingliederung in verschiedenen Formen:

Zum einen bietet sie Schutz:

- bei Stößen durch Dritte
- am Arbeitsplatz
- bei sportlichen Aktivitäten
- als Abdeckung z.B. unter dem Sicherheitsgurt beim Autofahren

Zum anderen bietet sie eine diskrete Versorgungsmöglichkeit: Durch die Pelotte liegt die Versorgung enger am Körper an und erlaubt daher mehr Möglichkeiten bei der Modeauswahl.

Weitere Vorteile durch die Anwendung einer Pelotte:

- die Darmgase werden schneller über den Aktivkohlefilter abgegeben. Patienten berichten über weniger Luft im Beutel, da die Pelotte auf die Filter ausgerichtet werden muß
- eine hygienische Wiederaufbereitung ist möglich, da das Silikon ausgekocht werden kann
- Geräusche werden verringert, da die Darmgeräusche durch die Abdeckung reduziert werden
- das Schweregefühl durch die gefüllte Stomaversorgung wird reduziert
- das innerliche Spannungsgefühl wird vermindert



Für weitere Informationen rufen Sie uns bitte an oder schreiben eine E-Mail.